

Faites de la magie!

Vers l'âge de trois ans, la tétine peut déjà disparaître au pays enchanté et à partir de quatre ans le pouce et compagnie ne devraient plus se retrouver en bouche mais devraient visiter le pays enchanté et être remplacés par **MUPPY®**!



MUPPY® avec butée existe dans les tailles et modèles suivants:

*Pour la denture lactéale
(taille I, anneau rouge)*



Rigide avec butée
(disponible en quatre
couleurs)

*Pour la denture mixte
(taille II, anneau bleu)*



Rigide avec butée
(disponible en quatre
couleurs)



Souple avec butée
(disponible en transparent)



Souple avec butée
(disponible en transparent)



Pour en finir avec les
mauvaises habitudes

MUPPY®

avec butée

rigide et souple

*MUPPY® l'écran buccal vestibulaire
d'après le Prof. Hinz
Pour le plus beau sourire d'enfant du monde*


Dr. Hinz
Dental

Dr. Hinz Dental-
Vertriebsgesellschaft
Ein Dr. Hinz Unternehmen

MUPPY® – L'écran buccal vestibulaire

Une solution idéale aux habitudes de succion nuisibles

- ◆ Aide à stopper toutes les formes de succion nuisibles
- ◆ Élimine les para-fonctions de la langue
- ◆ Renforce la musculature labiale
- ◆ Rééduque la fermeture labiale
- ◆ Supprime la respiration buccale
- ◆ Aide à éliminer les défauts d'élocution (le zézaïement par exemple)
- ◆ Favorise l'auto-guérison d'anomalies préexistantes
- ◆ Évite l'interposition et la succion de la lèvre inférieure

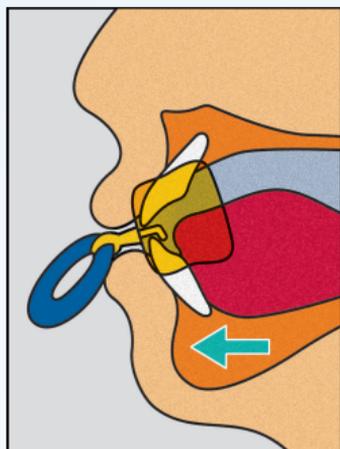

La butée conduit la mandibule vers l'avant et de ce fait corrige la béance.

Les 6 règles d'utilisation du MUPPY®

L'expérience montre qu'à l'aide d'un écran buccal *MUPPY*® plus de 90% des enfants ont mis un terme à leurs habitudes de succion nuisibles. Votre soutien et quelques règles aident votre enfant:

1 L'écran buccal *MUPPY*® se substitue au pouce ou à la tétine. Le transfert de l'un vers l'autre doit se faire de façon volontaire et sans contrainte.

2 L'écran buccal *MUPPY*® doit être porté toutes les nuits.

3 L'écran buccal *MUPPY*® doit aussi être porté régulièrement de jour durant quelques heures (en jouant ou en regardant la télévision). Ceci est important afin que votre enfant change plus facilement ses habitudes.

4 En général, l'écran buccal *MUPPY*® supprime les habitudes de succion en une semaine. Participez pour éviter un retour à l'ancienne habitude: votre enfant devrait continuer à porter l'écran buccal *MUPPY*® la nuit pendant encore au moins six à huit semaines.

5 Lorsque l'écran buccal *MUPPY*® n'est pas porté, il doit retrouver sa place dans la boîte de rangement.


6 Ne pas oublier: de régulièrement se brosser les dents et de nettoyer l'appareil *MUPPY*®!

Causes habituelles

Sous "habitudes" on entend toutes les (mauvaises) habitudes qui pourraient perturber le développement normal des dents. Quelques exemples:

- ◆ La succion (des doigts, pouces, tétines, biberons, tissus, oreilles de peluches)
- ◆ Se mordre la lèvre inférieure et la langue
- ◆ La pression de la langue sur les dents, la succion labiale
- ◆ Se ronger les ongles, mâchonner des crayons
- ◆ Une déglutition atypique, une malposition de la langue
- ◆ Des troubles de l'élocution (le zézaïement par exemple)
- ◆ Des problèmes pour mordre et mastiquer
- ◆ La respiration par la bouche (conséquences: fréquentes affections respiratoires, avec l'âge apparition de troubles du sommeil dus au ronflement)

Conséquences des habitudes de succion nuisibles

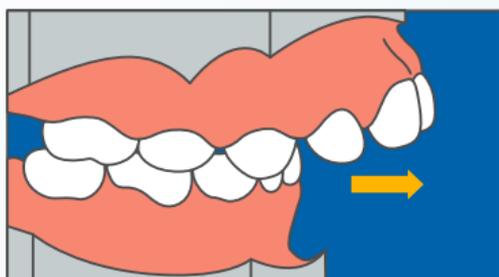

Proéminence des incisives maxillaires et rétro-position de la mandibule suite à des habitudes de succion durables.

Mis à part l'aspect souvent inesthétique, ces troubles du développement ont également des conséquences fonctionnelles ainsi que sur la santé: Votre enfant ne peut pas correctement mordre et avaler, il zézaïe et respire par la bouche au lieu du nez, ce qui peut provoquer entre autre de fréquentes affections respiratoires.