

Faites de la magie!

Vers l'âge de trois ans, la tétine peut déjà disparaître au pays enchanté et à partir de quatre ans le pouce et compagnie ne devraient plus se retrouver en bouche mais devraient visiter le pays enchanté et être remplacés par **MUPPY®**!



MUPPY® avec perle existe dans les tailles et modèles suivants:

*Pour la denture lactéale
(taille I, anneau rouge)*

*Pour la denture mixte
(taille II, anneau bleu)*





Pour en finir avec les
mauvaises habitudes

MUPPY®
avec perle


*MUPPY® l'écran buccal vestibulaire
d'après le Prof. Hinz
Pour le plus beau sourire d'enfant du monde*

Dr. Hinz
Dental
Dr. Hinz Dental-
Vertriebsgesellschaft
Ein Dr. Hinz Unternehmen

MUPPY® – L'écran buccal vestibulaire

Une solution idéale aux habitudes de succion nuisibles

- ◆ Aide à stopper toutes les formes de succion nuisibles
- ◆ Élimine les para-fonctions de la langue
- ◆ Renforce la musculature labiale
- ◆ Rééduque la fermeture labiale
- ◆ Supprime la respiration buccale
- ◆ Aide à éliminer les défauts d'élocution (le zézaïement par exemple)
- ◆ Favorise l'auto-guérison d'anomalies préexistantes
- ◆ Rétablit la fonction masticatoire inter-incisive

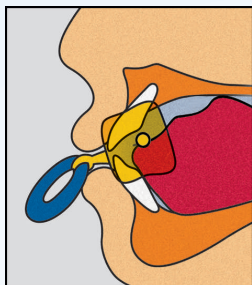

Grâce à la perle mobile, la langue est conduite vers le palais.

Les 6 règles d'utilisation du MUPPY®

L'expérience montre qu'à l'aide d'un écran buccal *MUPPY®* plus de 90% des enfants ont mis un terme à leurs habitudes de succion nuisibles. Votre soutien et quelques règles aident votre enfant:

1 L'écran buccal *MUPPY®* se substitue au pouce ou à la tétine. Le transfert de l'un vers l'autre doit se faire de façon volontaire et sans contrainte.

2 L'écran buccal *MUPPY®* doit être porté toutes les nuits.

3 L'écran buccal *MUPPY®* doit aussi être porté régulièrement de jour durant quelques heures (en jouant ou en regardant la télévision). Ceci est important afin que votre enfant change plus facilement ses habitudes.

4 En général, l'écran buccal *MUPPY®* supprime les habitudes de succion en une semaine. Participez pour éviter un retour à l'ancienne habitude: votre enfant devrait continuer à porter l'écran buccal *MUPPY®* la nuit pendant encore au moins six à huit semaines.

5 Lorsque l'écran buccal *MUPPY®* n'est pas porté, il doit retrouver sa place dans la boîte de rangement.

6 Ne pas oublier: de régulièrement se brosser les dents et de nettoyer l'appareil *MUPPY®*!

Causes habituelles

Sous “habitudes” on entend toutes les (mauvaises) habitudes qui pourraient perturber le développement normal des dents.

Quelques exemples:

- ◆ La succion (des doigts, pouces, tétines, biberons, tissus, oreilles de peluches)
- ◆ Se mordre la lèvre inférieure et la langue
- ◆ La pression de la langue sur les dents, la succion labiale
- ◆ Se ronger les ongles, mâchonner des crayons
- ◆ Une déglutition atypique, une malposition de la langue
- ◆ Des troubles de l'élocution (le zézaiement par exemple)
- ◆ Des problèmes pour mordre et mastiquer
- ◆ La respiration par la bouche (conséquences: fréquentes affections respiratoires, avec l'âge apparition de troubles du sommeil dus au ronflement)

Indications pour l'écran buccal avec perle

- ◆ Malpositions de la langue
- ◆ Para-fonctions de la langue (déglutition atypique, défauts d'élocution)
- ◆ Écoulement salivaire du à l'ouverture permanente de la bouche
- ◆ Ouverture permanente de la bouche chez des patients handicapés

Grâce à une perle mobile disposée sur un arc métallique, la langue doit être repositionnée correctement vers le palais afin de rétablir au fil du temps la fermeture labiale. La langue doit simultanément être conduite vers l'avant et le haut de façon à éviter des malpositions dentaires.