

SAM 2PX

Le SAM® 2PX est une variante des articulateurs SAM® avec beaucoup de fonctions très utiles. Sa facilité d'entretien rend cet appareil très attractif.

L'articulateur Arcon dispose d'un très pratique mécanisme de verrouillage centré rotatif permettant une ouverture totale de l'appareil. L'angle de l'aile de Bennett et l'angulation du déplacement du boîtier condylien sont réglables, les courbures du déplacement du boîtier condylien peuvent être facilement remplacés.


Les protections transparentes présentes sur le dessous des boîtiers condyliens servent aux montages prothétiques ou alors de sécurité pour les moins expérimentés.

Elles maintiennent également ensemble les parties supérieures et inférieures de l'appareil lorsque le verrouillage centré est débrayé et permettent de ce fait des mouvements excentriques.


Naturellement cet appareil aussi peut être transformé en un articulateur totalement réglable.




Caractéristiques du SAM 2PX

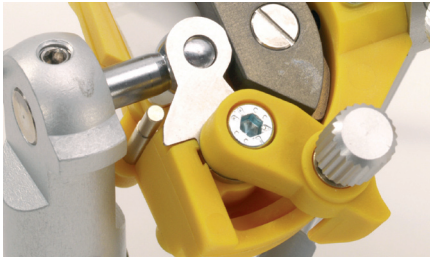


Verrouillage centrique (avec ressort à lame)

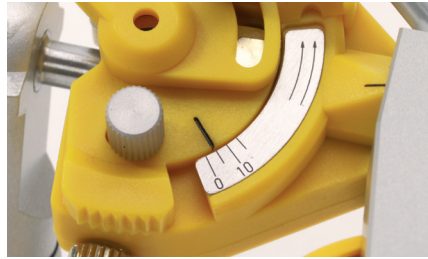

Réglage de l'angle de Bennett

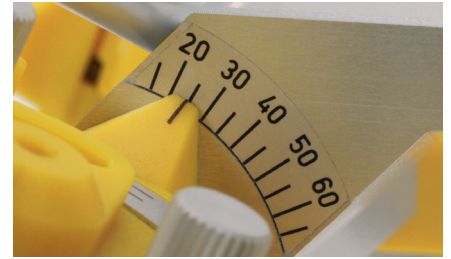


Réglage de l'angulation du déplacement du boîtier condylien

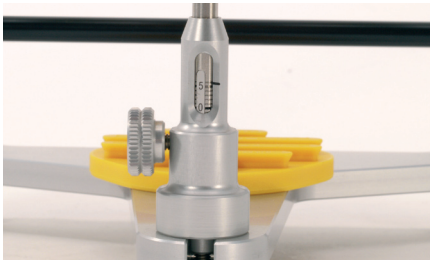

Tige incisive avec graduation millimétrique



Mandrin pour arc de transfert

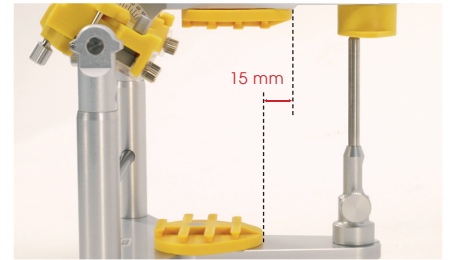

Décrochement sagittal de 15 mm de la plaque de montage mandibulaire



Choix de plaques de montage pour modèles. Magnétiques ou version avec vis. (Axiosplit en option)



Tige de support pour la partie supérieure de l'articulateur en position ouverte




Possibilité de basculement vers l'arrière avec 2 béquilles



Vis de réglage
Protrusion (jusqu'à 5,5 mm)
Rétrusion 15°



Accessoire:
Tige incisive micro-ajustable

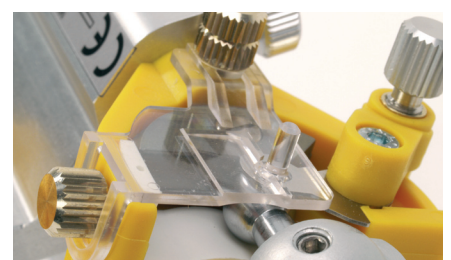

Protection du boîtier condylien



Accessoire:
Table incisive réglable



Accessoires:
Jeu d'ailettes de Bennett et de cales condyliennes



La haute qualité des matériaux et leur usinage garantissent longévité, précision et facilité d'entretien de l'appareil